

SISTEMA OCCIPITOCERVICAL

VIA POSTERIOR



Versátil e adequado para resultados efetivos em cirurgias da coluna cervical.


O Sistema Occipitocervical é ideal para casos de fixação da coluna cervical, inclusive com o occipital. Um grande avanço para o seu trabalho através de um sistema completo.

Destaca-se em sua composição por parafusos monoaxiais e poliaxiais que trazem uma fixação mais estável à coluna cervical, atingindo as primeiras vértebras torácicas. Realize uma implantação rápida e segura garantida pela mobilidade dos parafusos poliaxiais.



ÓSSEA
MEDICAL TECHNOLOGY

- Traumas.
- Patologias ou compressão neural cervical.
- Falta de estabilidade na coluna cervical.
- Fixação do occipital na coluna cervical (tetraplegia).

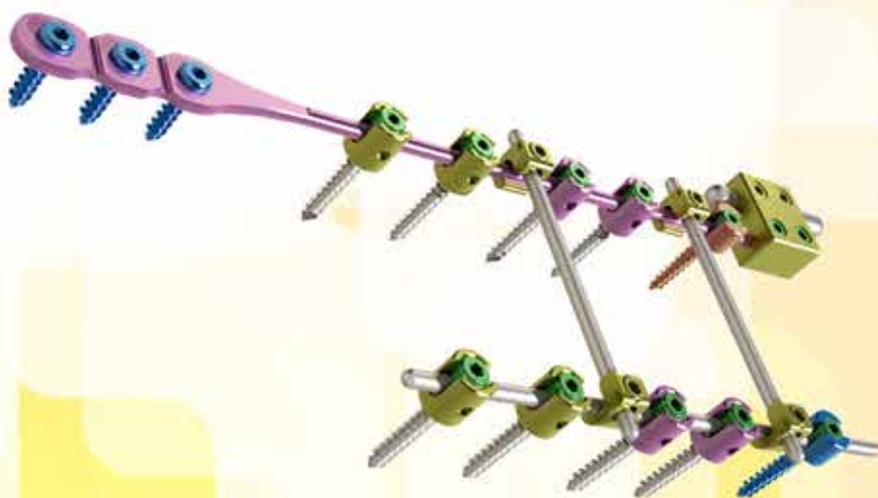

D4V14

SISTEMA OCCIPITOCERVICAL

HASTES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS

Comprimento (mm)	Comprimento (mm)			
	100	180	240	300
Ø 3,18 mm				

PARAFUSO ESPONJOSO PARA PLACA OCCIPITOCERVICAL

Comprimento (mm)	Comprimento (mm)				
	6	8	10	12	14
Ø 3,5 mm					

PARAFUSOS MONOAXIAIS

	Comprimento (mm)													
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30	36	40	
Ø 3,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 4,0 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PARAFUSOS POLIAXIAIS

	Comprimento (mm)												
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	30	36	40	45
Ø 3,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 4,0 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VERSATILIDADE

Com parafusos monoaxiais e poliaxiais, fixa a coluna cervical desde os primeiros níveis até as primeiras vértebras torácicas.

MOBILIDADE

Implantação rápida e segura nas massas laterais garantida pela mobilidade dos parafusos poliaxiais.

FIXAÇÃO

Placas occipitocervicais de 3 ou 4 furos são fixadas com parafusos esponjosos e prolongam a fixação da coluna ao crânio. Conectores distais dão prolongamento horizontal à haste, aumentando as possibilidades de fixação.

SEGURANÇA

Sistema de tração transversal com haste, ganchos e bloqueadores proporciona maior segurança.

ADAPTAÇÃO

Variedade de tamanhos para todos os componentes, com implantes adequados para as necessidades e anatomia de cada paciente.

INSTRUMENTAL

Kit completo e eficaz para um procedimento cirúrgico rápido e seguro.



Financiamento pelo BNDES

Com a Óssea você pode adquirir seu produto através do BNDES.

Entre em contato pelo telefone (19) 3246.2622 e saiba mais.